

機械器具 70 歯科用鋳造器
一般医療機器 歯科技工用リング焼却炉 36180000

ベゴ ミディテルム100MP

【警告】

- ①本品は歯科補綴物作成に用いるリング焼却炉である。
【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ②本品の操作は習熟したもの以外は使用しないこと。
- ③使用者の安全を守り、本品を正しく使用するために注意事項を必ず守ること。
- ④故障したときは、適切な指示を行い、修理は専門家に任せること。
- ⑤高温のリング等を扱うため、断熱手袋等を装備し、やけどをしないように注意すること。
- ⑥高地補正が必要な場所にあつては、高地補正を行うこと。
- ⑦心臓ペースメーカをお使いの方は、本品を使用しないこと。


【禁忌・禁止】

次の行為は危険なため行わないこと。

- ①本品の改造
- ②不具合、故障状態での使用
- ③未整備状態での使用
(未整備状態とは、定期点検や日常の点検を行っていない状態をいう)
- ④ルツボ、リング等の付属品は弊社のものを使用すること。
他社のものを使用した場合は、故障の原因やケガをする可能性がある。

【形状・構造及び原理等】

形状：

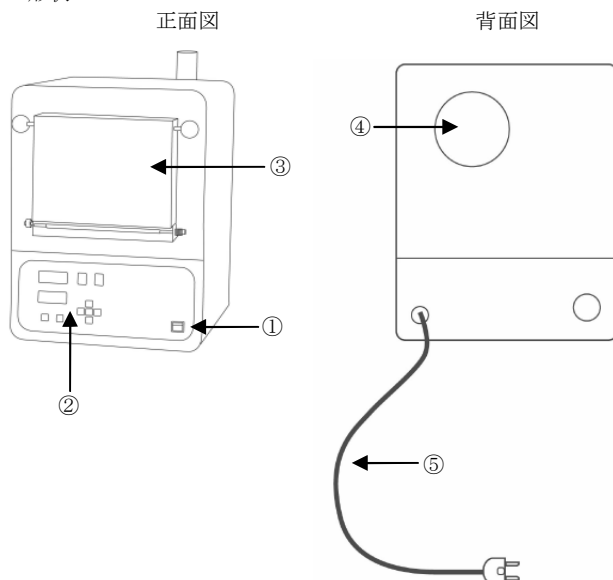

- ①電源スイッチ
- ②操作パネル・ディスプレイ
- ③焼却炉
- ④排気口
- ⑤電源コード

動作原理：電熱線を熱源として埋没リングに埋没されたワックスを焼却する。

【使用目的、効能又は効果】

インレーやクラウン及びブリッジの鋳造からワックスを焼却し、鋳型を加熱する装置です。

【品目仕様等】

性能

- 1) 電源：単相 100-120V (50/60 Hz)
- 2) 230V 定格電圧での電力：1,600W
- 3) 温度：最高 1,100℃
- 4) アーク電流：200A 一定
- 5) 外形寸法：高さ 480mm×幅 350mm×奥行き 420mm
- 6) 炉内寸法：高さ 95mm×幅 150mm×奥行き 180mm
- 7) 重量：約 28kg

【操作方法又は使用方法等】

1) 取り付け、設置

- ①本品の取り付け、設置は専門知識を持った担当者が行うこと。
- ②本品の詳細な取り付け、設置は付属の取扱説明書を参照すること。
- ③本品は安定した、しっかりした台の上に設置すること。

2) 操作方法又は使用方法

本品の詳細な操作方法および使用方法は、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

1) 使用環境及び使用条件

- ①熟練したもの以外は機器を使用しないこと。

2) 使用前の注意事項

- ①アースが完全に接続されていることを確認すること。

3) 使用中の注意事項

- ①本品から異臭、異音が出るときは速やかに本品の電源を切り、弊社にご連絡ください。
- ②本品全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
- ③外装温度が上昇するため、体が本品に触れないようにすること。

4) 使用後及び保管の注意

- ①本品の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対応する安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。
製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り 8 年間とする。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書「日常のお手入れ」の項をご使用前に必ずお読みください。

- 1) 本品及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった本品を再使用する場合は、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【包装】

[別売]

セラミックベースプレート (ミディテルム 100MP 用) 1
サーモカップル (ミディテルム 100MP 用) 1
エキストラクションパイプ ショート 1
エキストラクションパイプ ロング 1
スぺアヒーティングモールド (ミディテルム 100MP 用) 1
レギュラスファーネスエキストラクションシステム 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：075-257-7255（西日本営業所）

：03-3836-3691（東日本営業所）

：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～午後 5：00

F A X：075-257-7256

製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ
ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &
Co. KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

住所：〒604-0847

京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 513

京都第一生命泉屋ビル 8F

電話番号：075-257-7270

F A X：075-257-7271